




新規格（紫）注入物品使用上の注意点・ポイント

新規格製品では、栄養セット等の先端までプライミングして接続した場合、留置側のオスコネクタネジ部に栄養剤等が付着する事が分かっています。そのため、コネクタ部分が外れにくくなったケースがありました。栄養剤等の付着を低減するプライミングや接続方法についてご紹介します。

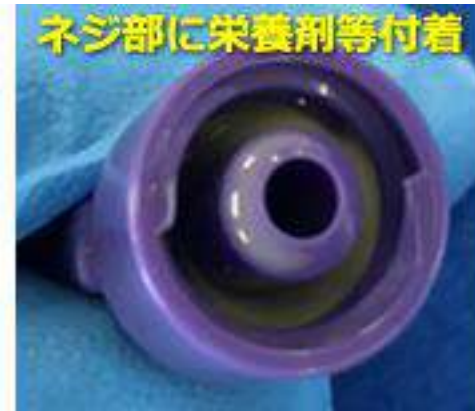

こんなことが起こります



汚れを固着させないために、次のことに気を付けてセットしましょう！

「栄養セット」のプライミング



プライミングはメスコネクタの手前までとする

「ENシリンジ」の充填



ENシリンジ先端まで充填した場合は少し押し子を引く



栄養剤等の投与後に、栄養カテーテル等のオスコネクタに栄養剤等が付着する場合があります。その場合は、下記のような方法で、きれいに保つようしてください。

オスコネクタのクリーニング専用デバイス


ENスワブは物品リストに入っており、提供できます。歯間ブラシ等で代用できます。

ENスワブ



この部品を間にはさむとコネクタ部分が汚れません。※部品は小さいので、お子様が間違っても飲み込まないように気をつけましょう！

ENプロテクトアダプタ

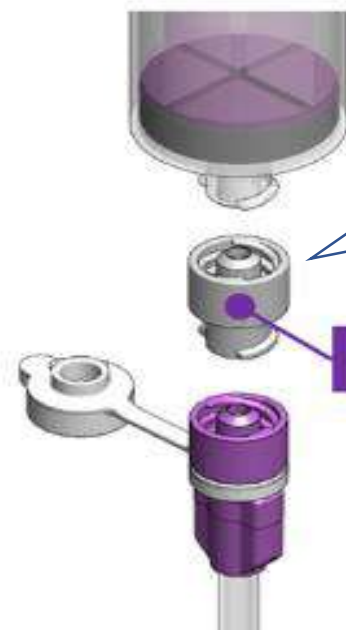



接続・取り外しにおけるポイント



充填された栄養剤が留置即のオスコネクタのネジ部へ入らないように、留置側を上側にして接続・取り外しを行ってください。そうするとコネクタ部分は汚れにくくなります。



投与側を上側にして
接続・取り外し

投与側

栄養セット、ENシリンジ等

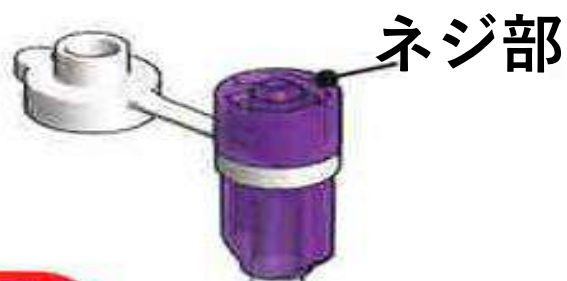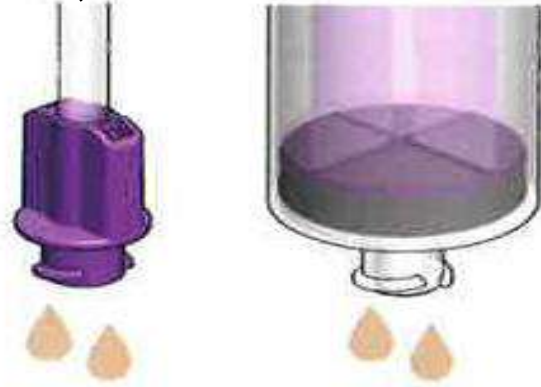

ネジ部

留置側

栄養カテーテル等




留置側を上側にして
接続・取り外し

留置側

栄養カテーテル等

ネジ部

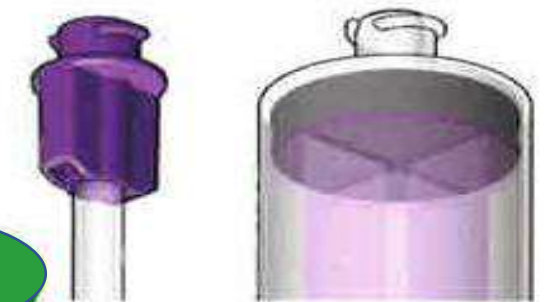

投与側

栄養セット、ENシリンジ等

何かお困りのことがございましたら、かかりつけ医か当院外来にご相談下さい。